


PARAVENTS DE SEPARATION

FLEXITOP



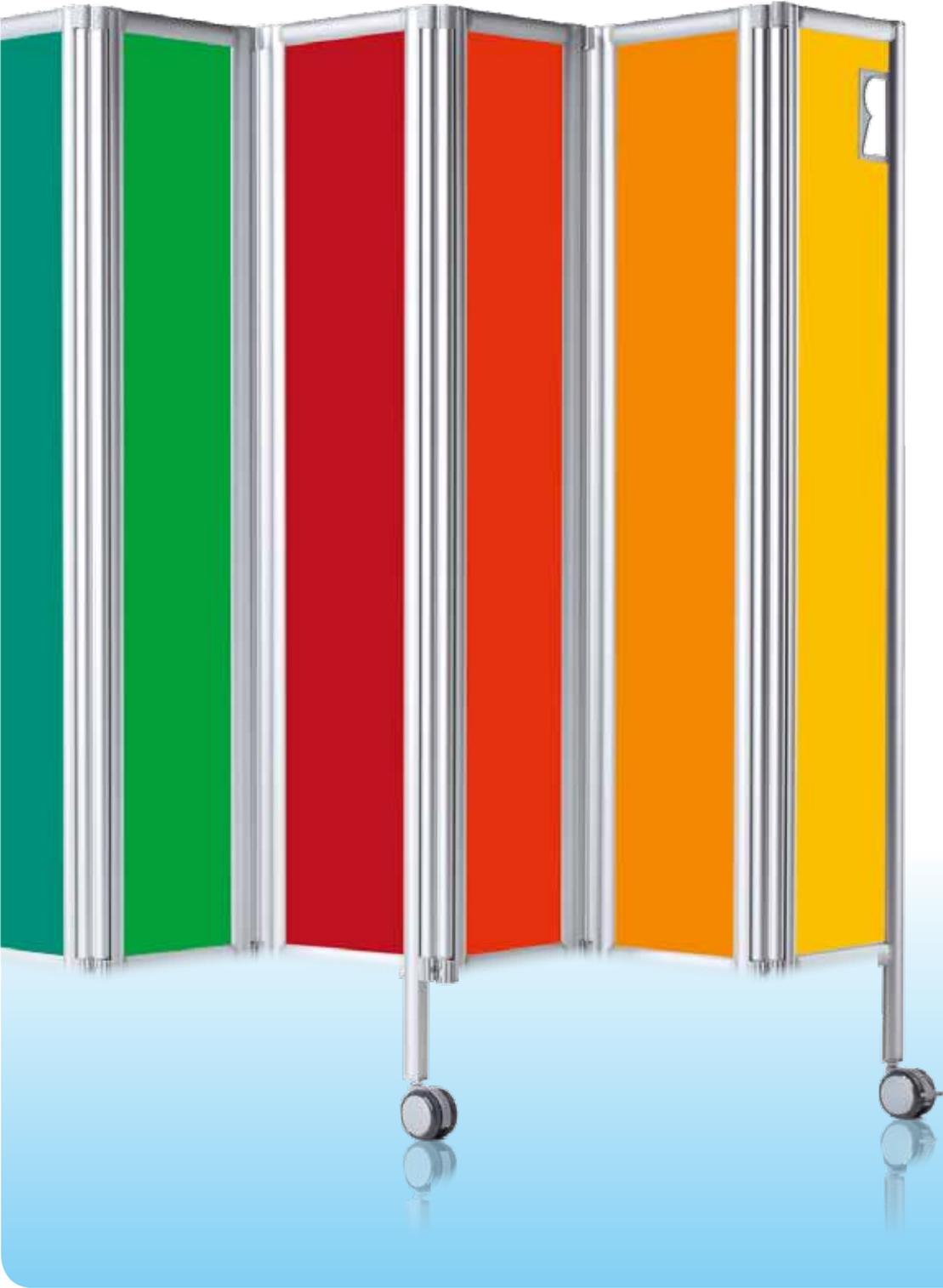

Le paravent rigide : montage mural ou sur rail

Stabilité maximale, peu d'encombrement : le paravent rigide avec montage mural ou sur rail.

Vous souhaitez protéger l'intimité des patients tout en les gardant sous surveillance ? Vous êtes dans l'impossibilité de gérer la désinfection et le nettoyage de rideaux de séparation ? Optez pour le paravent rigide : en quelques secondes il est mis en place. Après utilisation plier et ranger contre le mur, vous obtiendrez à nouveau un maximum de place. Nettoyage et désinfection de surface très simple et rapide grâce à une surface lisse résistante aux nettoyeurs et désinfectants d'usage courant.

Autres atouts du paravent rigide ropimex® : sa stabilité, sa flexibilité de manipulation : les charnières Ropimex Turn & Connect pivotent jusqu'à 360° et permettent de positionner le paravent comme vous le souhaitez. De plus, de part sa construction et ses matériaux haute qualité le paravent dispose d'une grande robustesse.



Paravent avec fixation murale



Paravent fixé sur rail



Paravent avec fixation murale et entretoise pour un dégagement mural.




Le paravent rigide reste dans sa position initiale grâce au frein positionné sur la dernière roulette.

Disponible en 10 coloris et 3 designs différents. Coloris différent par battant possible.



blanc standard
(sans supplément de prix)

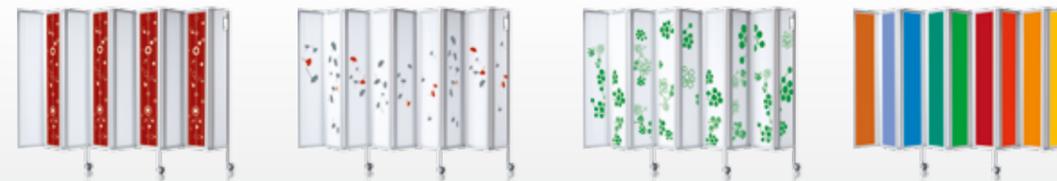

Les charnières **Turn & Connect** ont été spécialement conçues afin de pouvoir pivoter les battants jusqu'à 360°



Paravent fixé sur rail

L'alternative à la fixation murale : le paravent rigide mobile.



**Impossibilité de fixer le paravent rigide au mur ou sur rail ?
Opter pour la solution mobile.**

De cette manière, partout où le besoin s'en fait sentir créez une séparation provisoire ! Très pratique dans son utilisation, il est adaptable dans tous les domaines : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite ou de soins, dans les cabinets médicaux...

Installer, déployer les battants, après utilisation refermer et ranger où vous le souhaitez. Toujours aussi pratique côté hygiène car toute la gamme RFW se désinfecte et se nettoie avec une grande simplicité : les plaques en polycarbonate ainsi que les contours en aluminium sont résistants aux rayures et aux nettoyants désinfectants d'usage courant.



Disponible en 10 coloris et 3 designs différents. Coloris différent par battant possible.



blanc standard
(sans supplément de prix)



Développement d'un mécanisme releveur permettant de bloquer les battants et de soulever les roulettes. De ce fait, pas de roulettes endommagées ou de battants se dépliant lors d'un déplacement.

Paravent rigide : montage sur colonne.




La liberté de choisir l'endroit d'installation

Le paravent rigide combiné à la colonne: Vous souhaitez une installation fixe, mais n'avez aucun point de fixation ? Optez pour la fixation sur colonne.

La colonne en acier inoxydable carré possède 4 côtés de 5 cm de large, elle est fixée au sol par 4 vis.

Choisissez votre hauteur afin d'harmoniser l'ensemble colonne-paravent rigide. Grâce aux différents coloris et aux designs vous pouvez accentuer l'esthétisme d'une pièce ou au contraire le choisir standard en blanc, il se rendra plus discret.

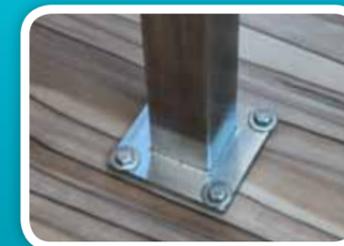

Fixation par 4 vis au sol




Finition esthétique

Disponible en 10 coloris et 3 designs différents. Coloris différent par battants possible.



blanc standard
(sans supplément de prix)

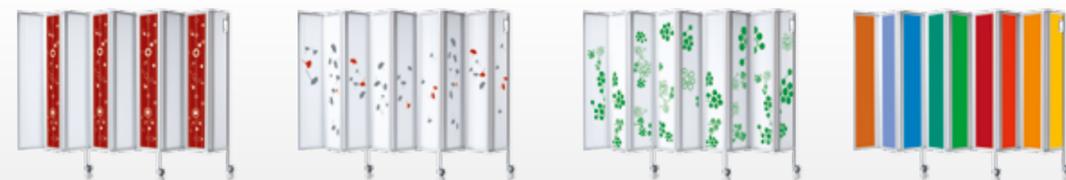

Possibilité de fixer 4 paravents par colonne



Le paravent rigide : les coloris et designs

Disponible en 10 coloris
et 3 designs différents



blanc standard
(sans supplément
de prix)



020
Jaune



015
orange



329
rouge oeillet



017
rouge cerise



063
vert tilleul



054
turquoise



053
bleu ciel



074
bleu gris



081
brun cuivre

Design COULEUR PLEINE (V)



- Au choix : couleur identique ou différente par battant
- Couleur posée sur les 2 côtés du battant, translucide

Design ABSTRAKT (A)



- Couleur à choisir dans la gamme des coloris. Peut être combiné avec la couleur pleine
- Design posé sur un côté du battant
- Grâce au polycarbonate translucide, le design apparait sur le côté opposé.
- Indiquer le côté d'installation du paravent : droit ou gauche.

Design MODERN (M)



- Couleur à choisir dans la gamme des coloris. Peut être combiné avec la couleur pleine
- Design posé sur un côté du battant
- Grâce au polycarbonate translucide, le design apparait sur le côté opposé.
- Indiquer le côté d'installation du paravent : droit ou gauche.

Design GINGKO (G)



- Couleur à choisir dans la gamme des coloris. Pas de combinaison possible avec la couleur pleine
- Design posé sur un côté du battant
- Grâce au polycarbonate translucide, le design apparait sur le côté opposé.
- Indiquer le côté d'installation du paravent : droit ou gauche.



Le paravent rigide : montage mural.

Données techniques



Paraventrigide RFW avec montage mural ou sur rail

Les panneaux translucides en Polycarbonate créent une atmosphère chaleureuse et n'assombrissent pas la pièce.

Mise en place en quelques secondes, replié il prend très peu de place. Extension au delà de 3m possible. 3 différentes hauteurs proposées, largeur de 30 cm par panneau. Charnières ropimex® **Turn & Connect** qui pivotent à 360° et ne laisse aucun champ visuel entre 2 battants.

Matériau :

Contours et charnières en aluminium anodisé.

Pièces plastiques : Polyamide comprenant 15% de fibres de verre

Plaques : Polycarbonate 2 mm d'épaisseur, blanc, translucide, difficilement inflammable B1, excellente résistance aux rayures

Visserie : V2A acier inoxydable, ne rouille pas

Conseils d'entretien : avec produits de désinfection d'usage courant.

RFW	
Largeur battant :	30 cm
Hauteurs :	145 / 165 / 185 cm
Poids :	3,00 / 3,50 / 4,00 kg/Flügel

Modèles	largeur dimension ouverte
3 battants	90 cm
4 battants	120 cm
5 battants	150 cm
6 battants	180 cm
7 battants	210 cm
8 battants	240 cm
9 battants	270 cm
10 battants	300 cm



Accessoires : les étaux



Etaux pour fixation sur rail.

Les étaux sont vendus par set de deux pièces

Accessoires : entretoises



Entretoise standard : 10 cm
Le set comprend 2 pièces
Dimensions spéciales sur demande

Entretoises pour fixation murale


Positionnement des roulettes



2 battants: 1 roulette 3 battants: 1 roulette 4 battants: 2 roulettes 5 battants: 2 roulettes 6 battants: 2 roulettes 7 battants: 3 roulettes 8 battants: 3 roulettes 9 battants: 3 roulettes 10 battants: 4 roulettes

Le paravent rigide : la solution mobile

Données techniques

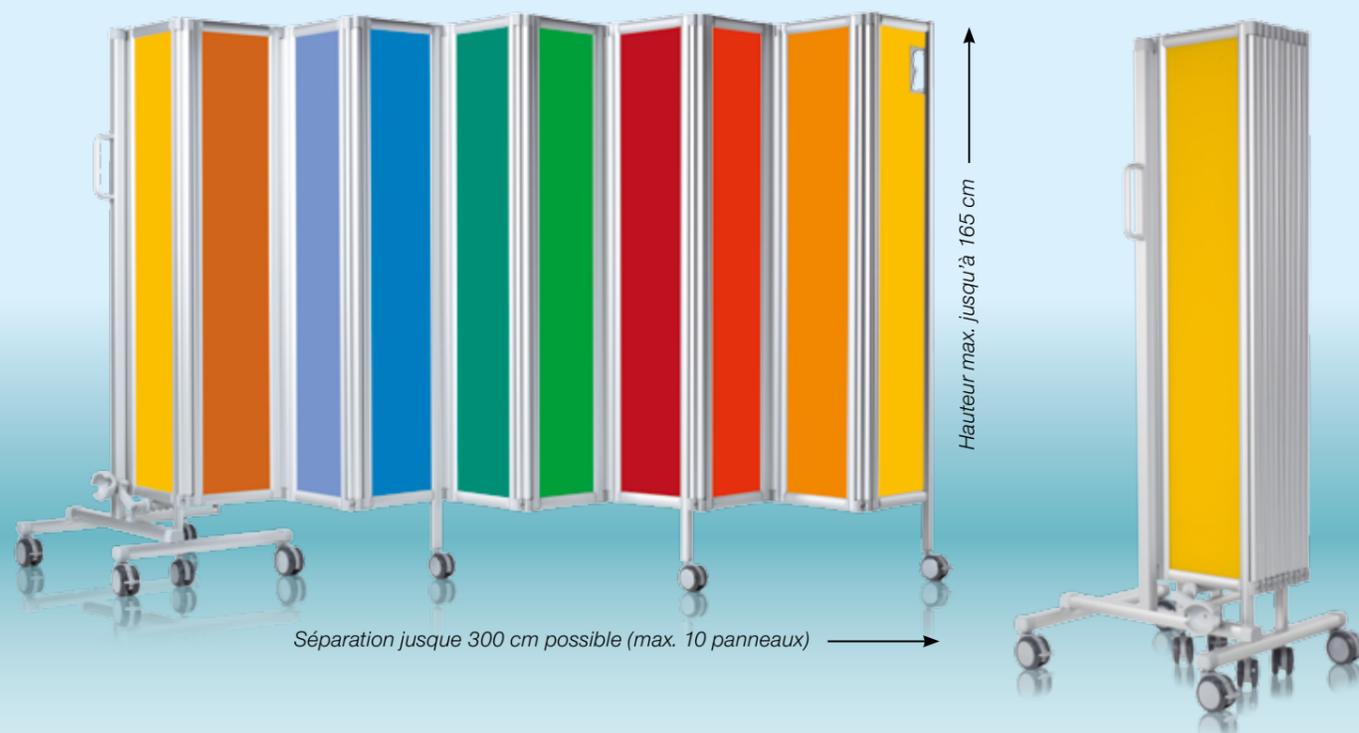

Paravent avec chassis mobile

Pour assurer la meilleure stabilité possible, la version mobile est uniquement disponible jusqu'à un maximum de 10 battants et sur les deux hauteurs 145 et 165 cm.

Matériau :

Contours et charnières en aluminium anodisé

Pièces plastiques : Polyamide comprenant 15% de fibres de verre



RFW-FG4	RFW-FG6
Hauteur : 145 cm	Hauteur : 165 cm
Dimensions du piètement : 52 x 59 cm	Dimensions du piètement : 52 x 59 cm
Poids : 9,75 kg	Poids : 10,55 kg

Modèles	largeur dimension ouverte
3 battants	90 cm
4 battants	120 cm
5 battants	150 cm
6 battants	180 cm
7 battants	210 cm
8 battants	240 cm
9 battants	270 cm
10 battants	300 cm

Développement d'un mécanisme relevateur permettant de bloquer les battants et de soulever les roulettes. De ce fait pas de roulettes endommagées ou de battants se dépliant lors d'un déplacement.

Mise en place en quelques mouvements :



Débloquer grâce à la pédale



Ouvrir le paravent



Après utilisation replié les battants entre eux



Bloquer les battants en actionnant la pédale vers la droite

